

KUGELKOPF


Der Champions®-Kugelkopf ist ein 1-teiliges Schraubimplantat, das auf Knochenniveau zu inserieren ist. Es stehen Implantate in den Durchmessern 2,5/3,0/4,0 mm und Längen von 8/10/12/14/16/18 mm zur Verfügung. Hierdurch ist ein weitgefächertes Indikationsspektrum gegeben. Das Implantat eignet sich für folgende Insertionen:

- zur Insertion in den bereits langfristig abgeheilten Kieferknochen (Spätimplantation)
- zur verzögerten Insertion (6 - 8 Wochen nach Zahnextraktion)
- zur Sofortimplantation (direkt nach Zahnextraktion – unter entsprechenden Bedingungen).

Kugelkopf-Implantate können in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1 - D4) zur Fixierung von herausnehmbarem Zahnersatz eingesetzt werden. Im Oberkiefer sollten mindestens drei Pfeiler pro Quadrant, im Unterkiefer mindestens zwei Pfeiler pro Quadrant gesetzt werden.

Beachten Sie bitte die Indikationseinschränkungen in der Gebrauchsanleitung.

Material: Titan Grad 4

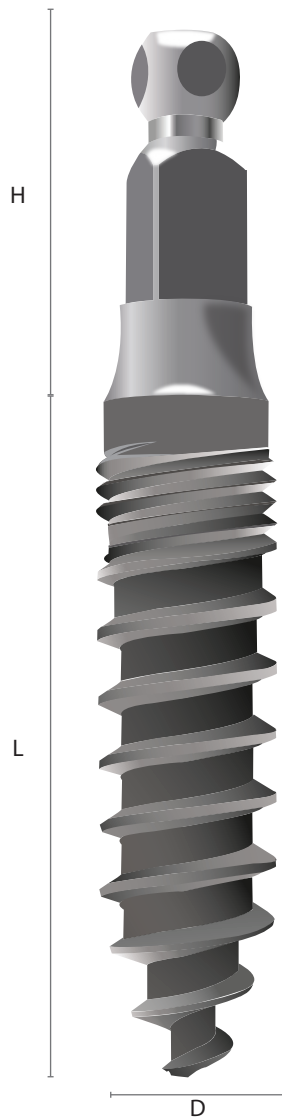

Durchmesser	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Typ
2,5 mm	10 mm	6,3 mm	1900	●
	12 mm	6,3 mm	2015	
	14 mm	6,3 mm	2035	
	16 mm	6,3 mm	2055	
3,0 mm	8 mm	6,8 mm	1890	
	10 mm	6,8 mm	1905	
	12 mm	6,8 mm	2016	
	14 mm	6,8 mm	2040	
	16 mm	6,8 mm	2060	
	18 mm	6,8 mm	2080	
4,0 mm	8 mm	7,1 mm	1895	
	10 mm	7,1 mm	2005	
	12 mm	7,1 mm	2025	
	14 mm	7,1 mm	2050	
	16 mm	7,1 mm	2070	